



Tele® Derma

Hospital Universitario
CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.

Toma de imágenes




A continuación, se presentan recomendaciones generales y específicas para la toma de imágenes en la App Telederma. La cámara fotográfica de la App ha sido configurada y programa de acuerdo a los requerimientos técnicos para teledermatología. Recomendamos seguir las siguientes instrucciones:




Recomendaciones generales


1. Explicar al paciente que se tomaran imágenes de su lesión de piel para ser enviadas a un médico dermatólogo.

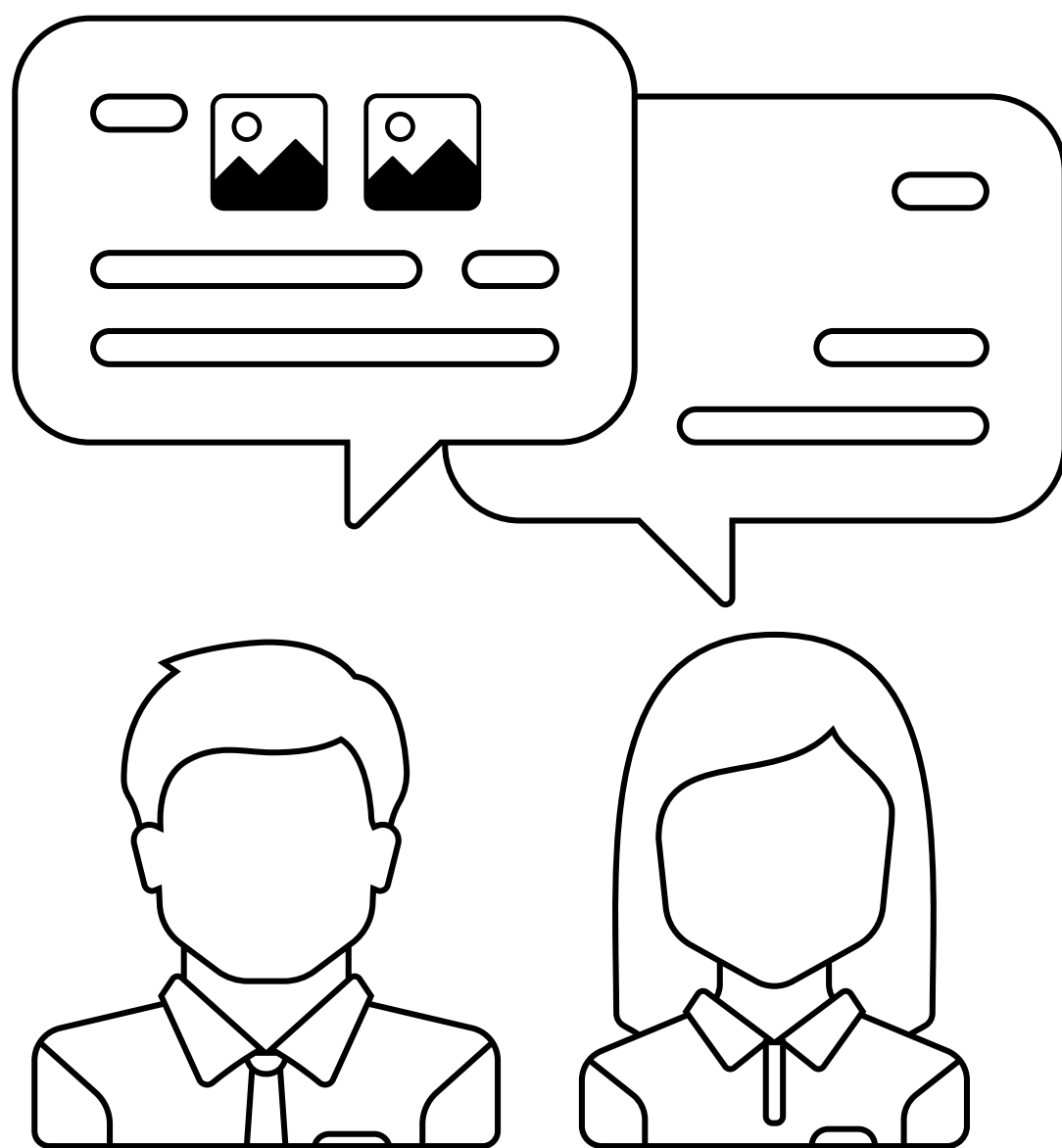





2. Tomar las imágenes en un consultorio con buenas condiciones de luz natural y artificial (bombillo). De igual forma, evite ubicarse en lugares o espacios donde se generen sombras.

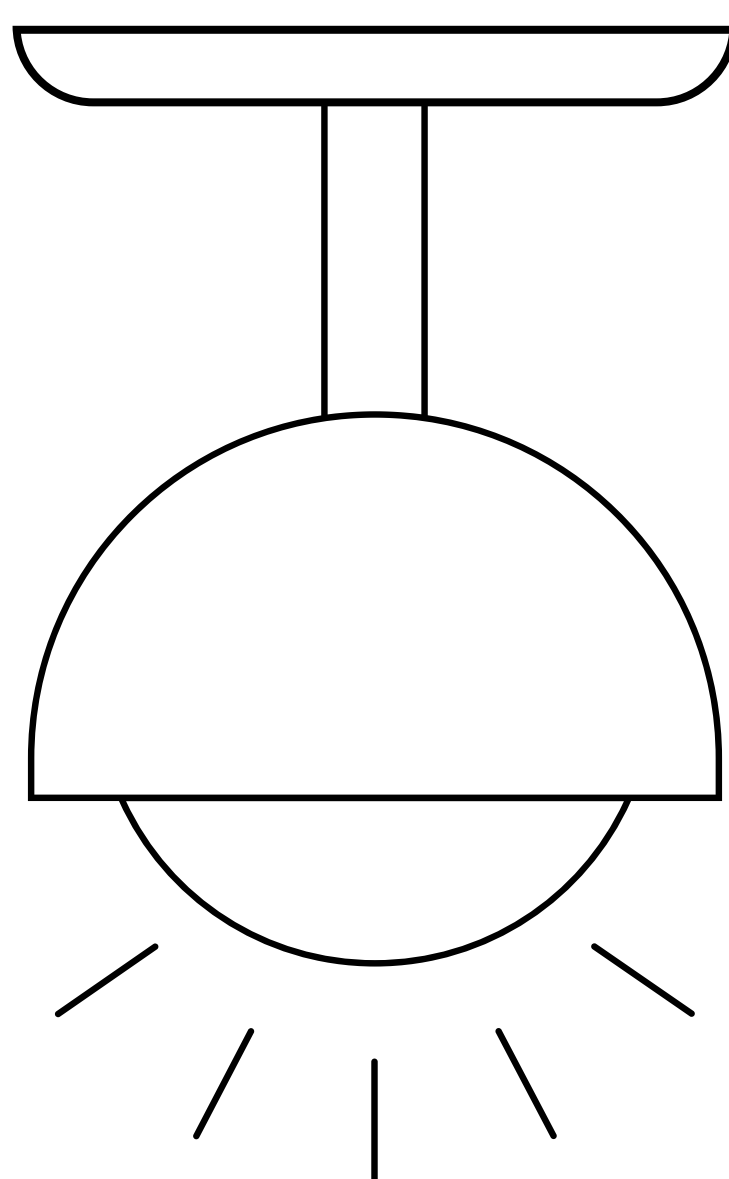


3. Utilice el fondo blanco incluido en el Kit Telederma para tomar las imágenes de las lesiones.

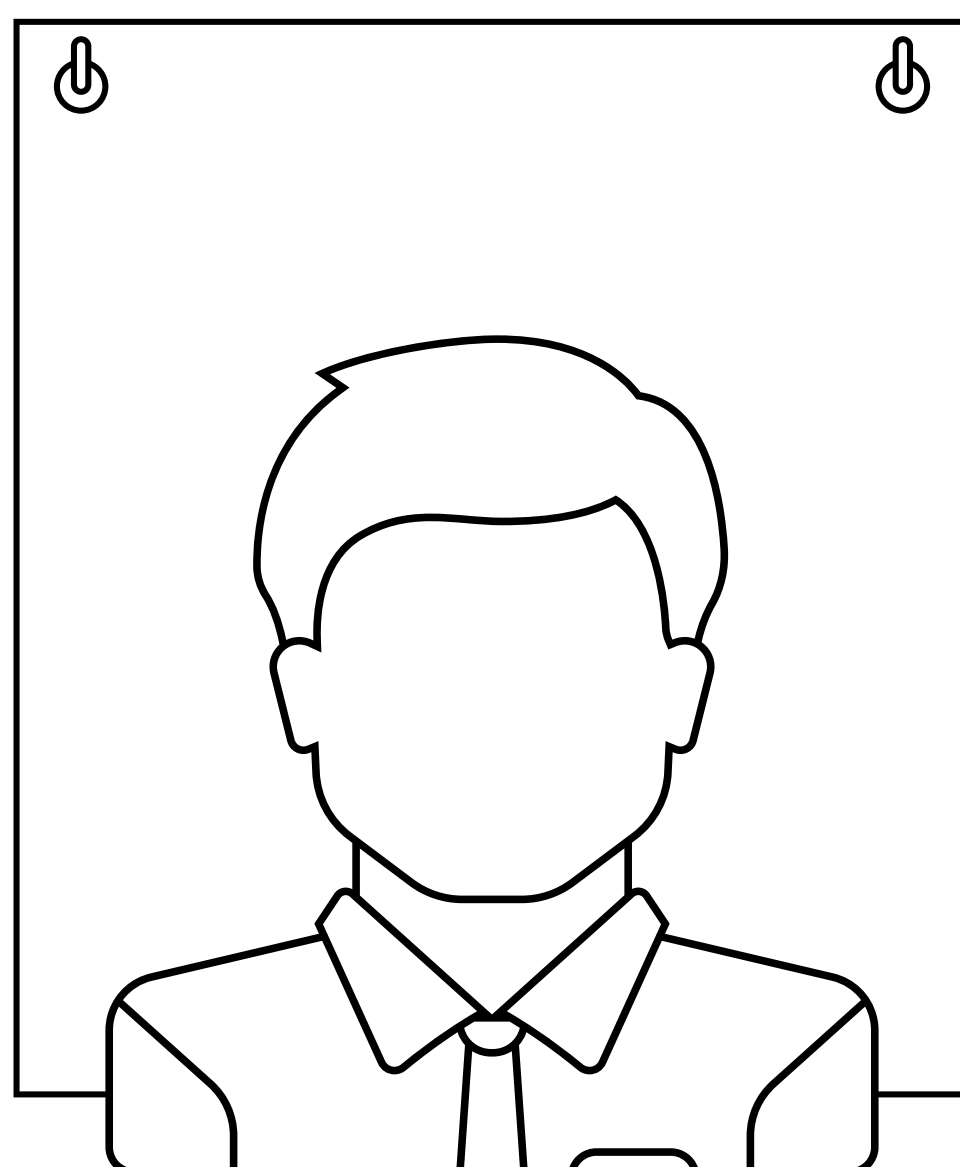


4. Solicítele al paciente retirarse prendas o accesorios de vestir (anillos, collares, cadenas, etc) que puedan interferir con la toma de las imágenes o visualización de la lesión.

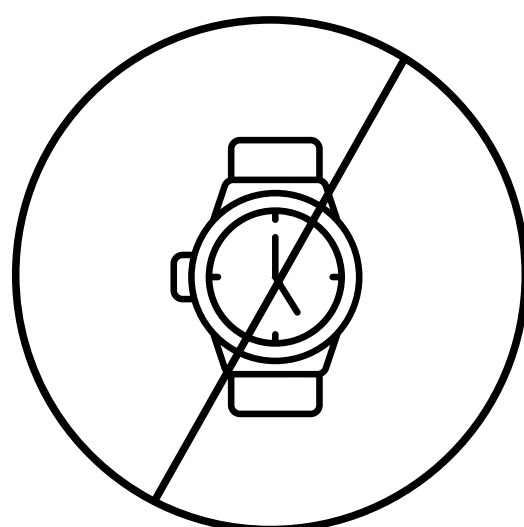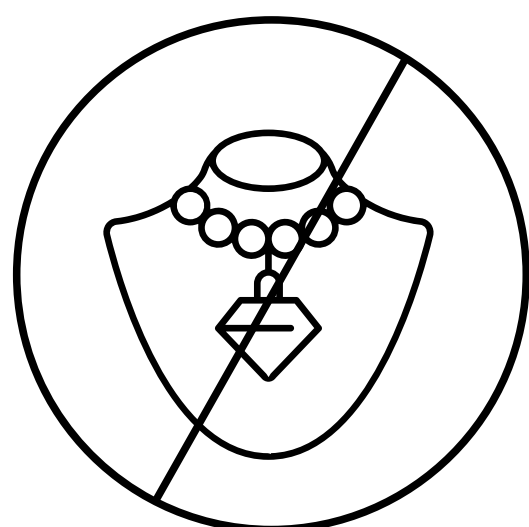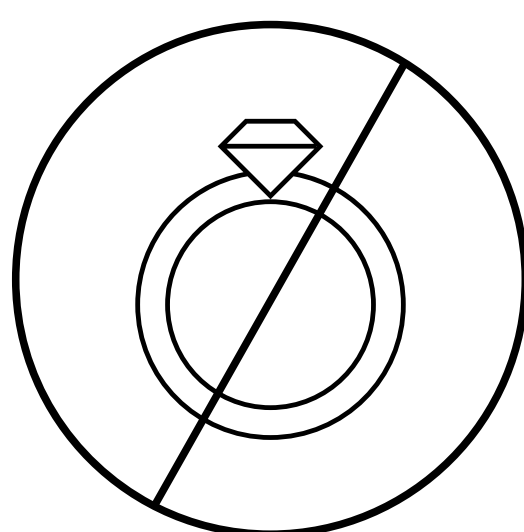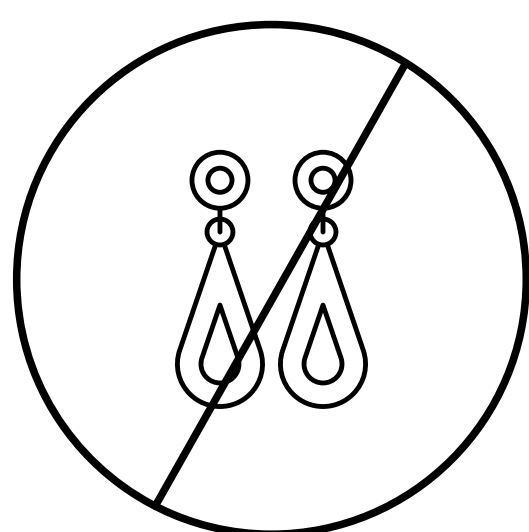

5. Solicítele al paciente no moverse mientras se toman las imágenes.

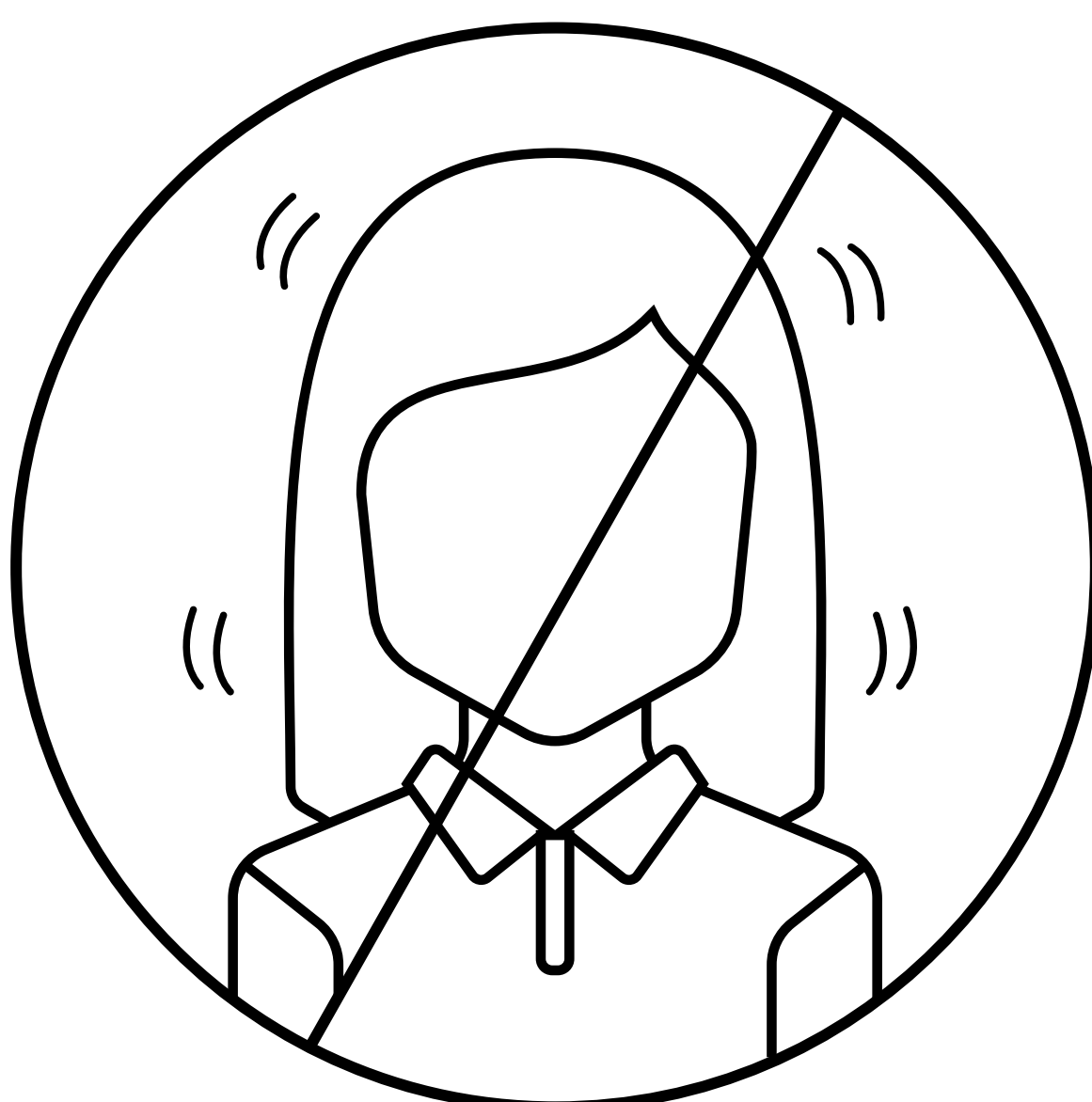


6. En el caso de tomar imágenes de genitales, evitar tomar imágenes del rostro del paciente.

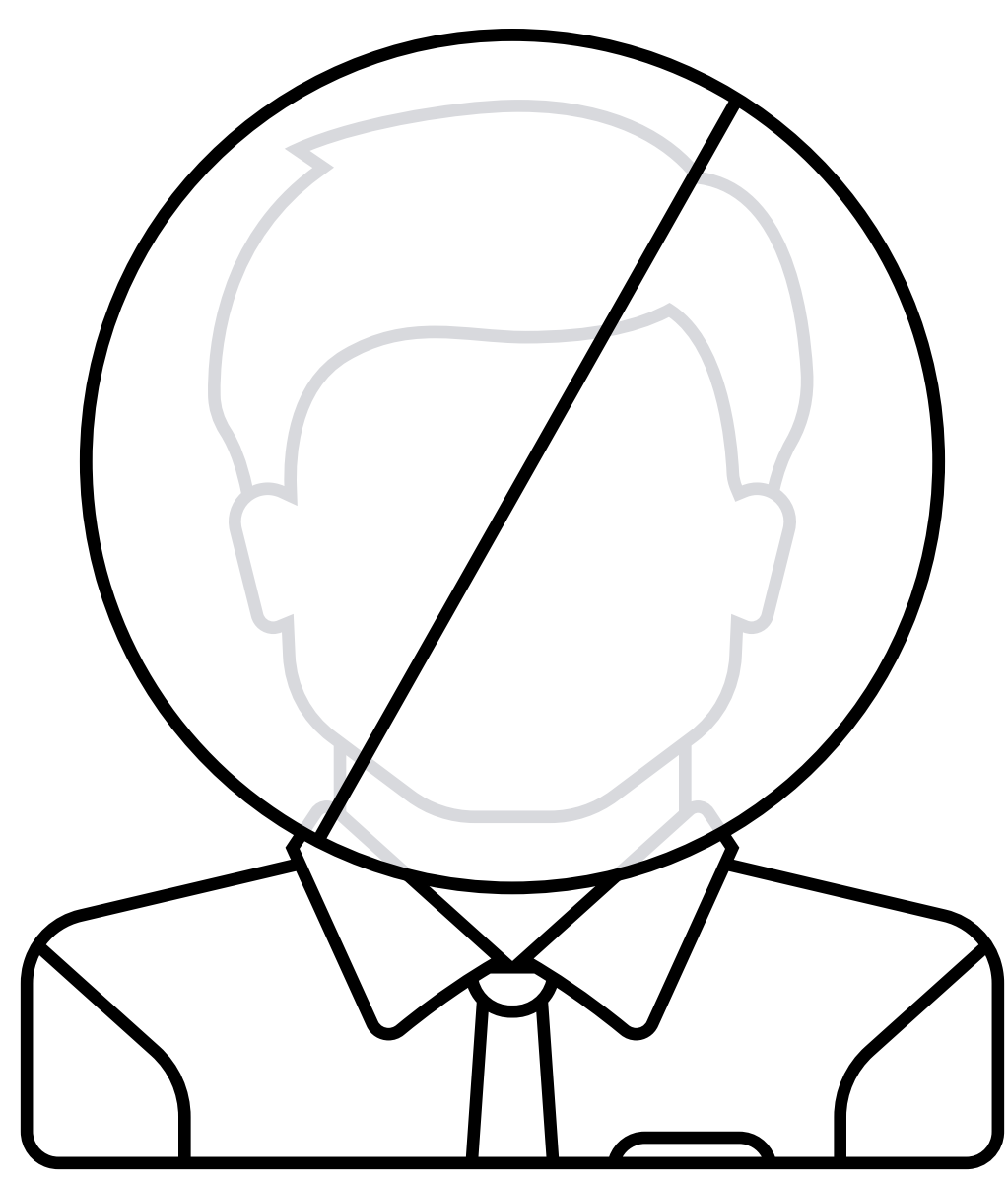


Recomendaciones específicas


1. Imagen panorámica donde se observe la lesión

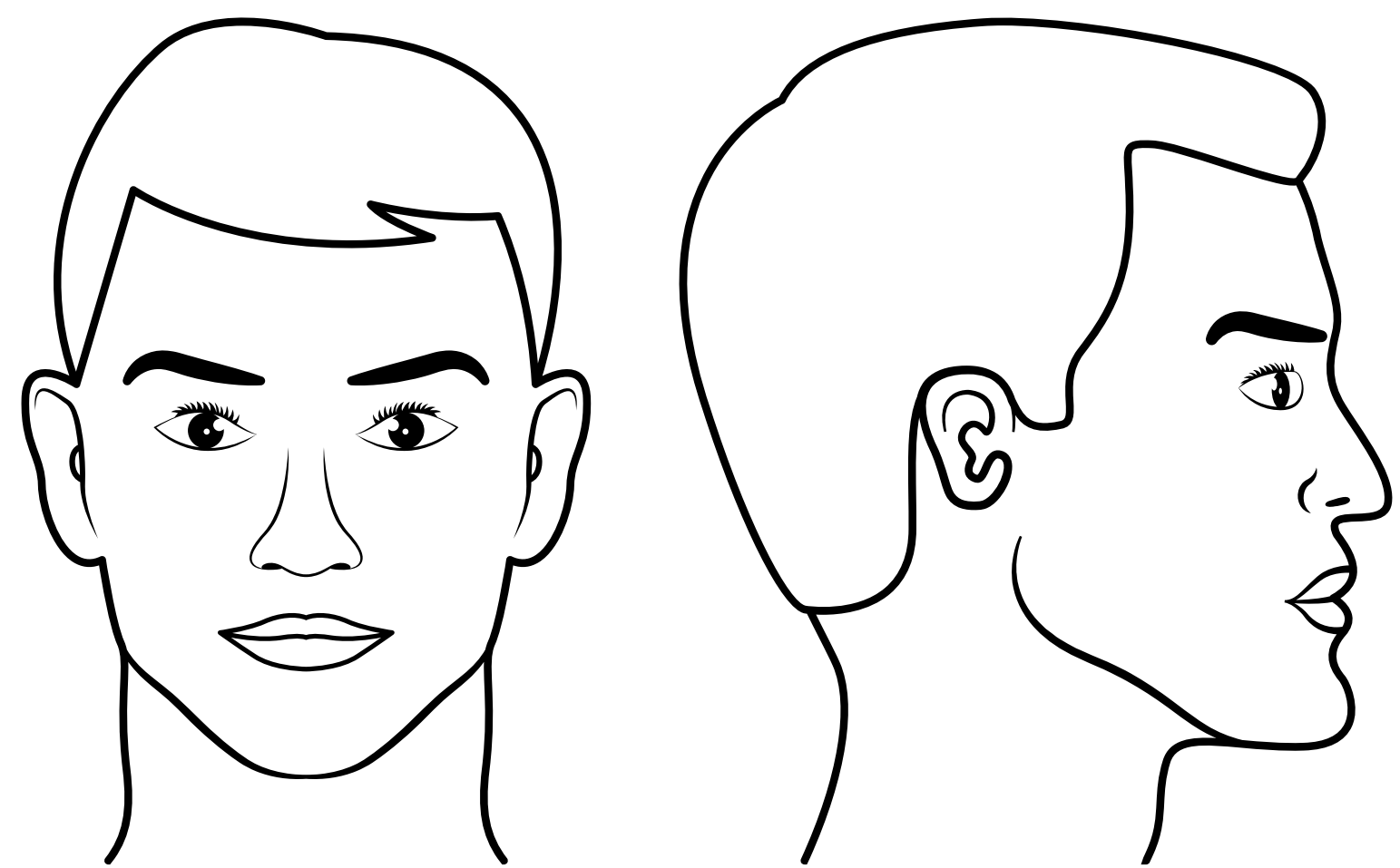



Torso

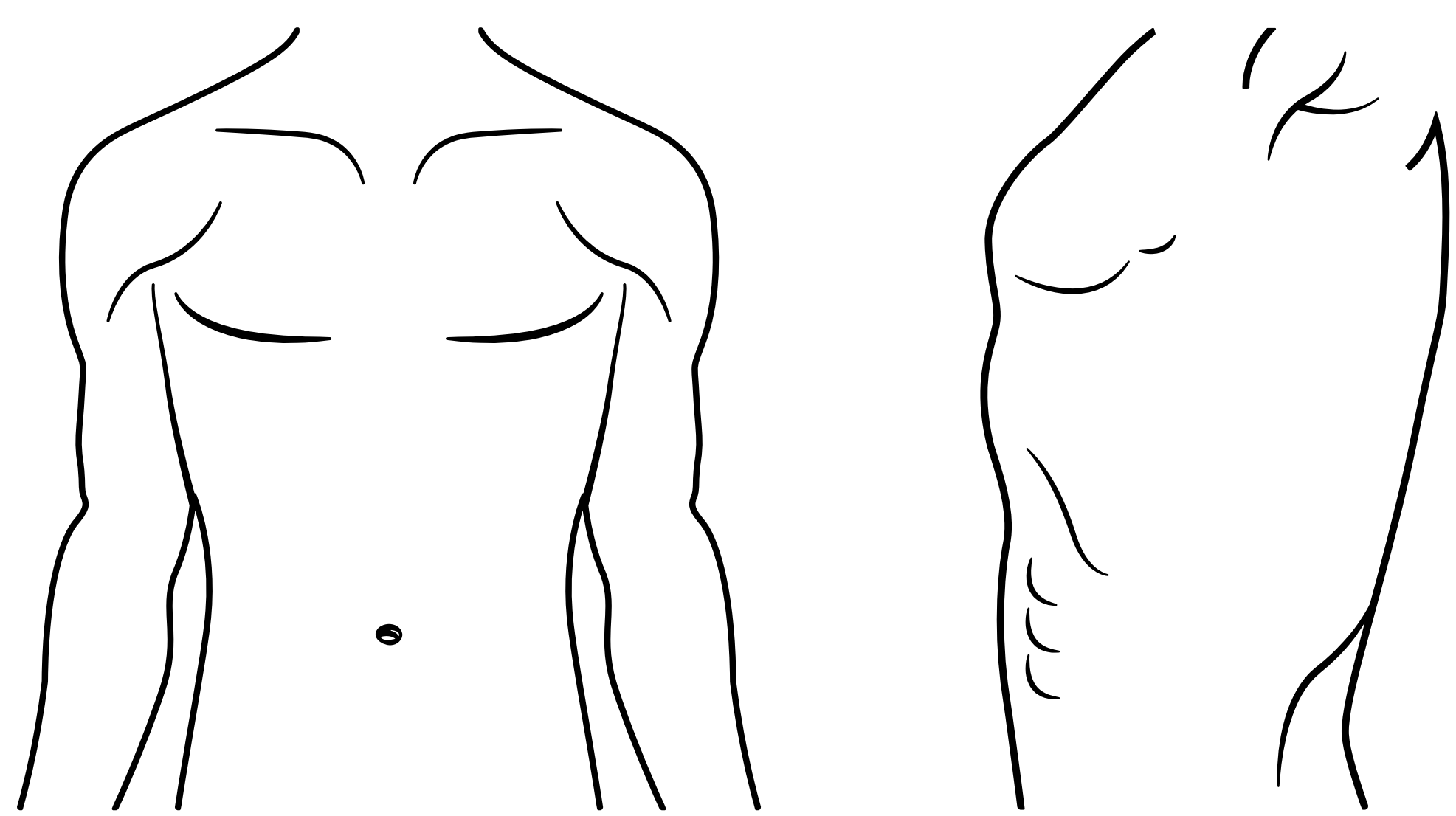


Brazos

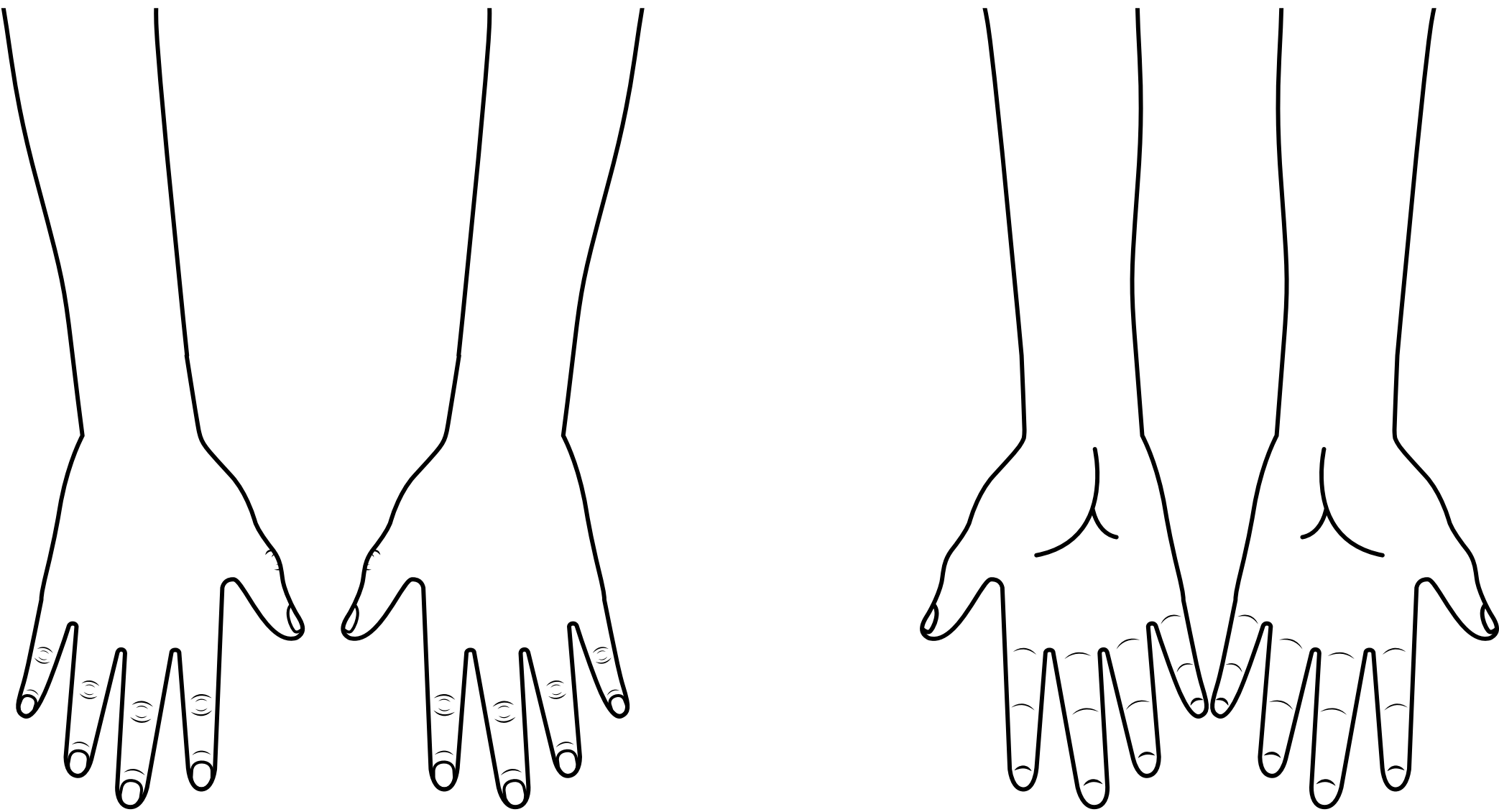


Manos

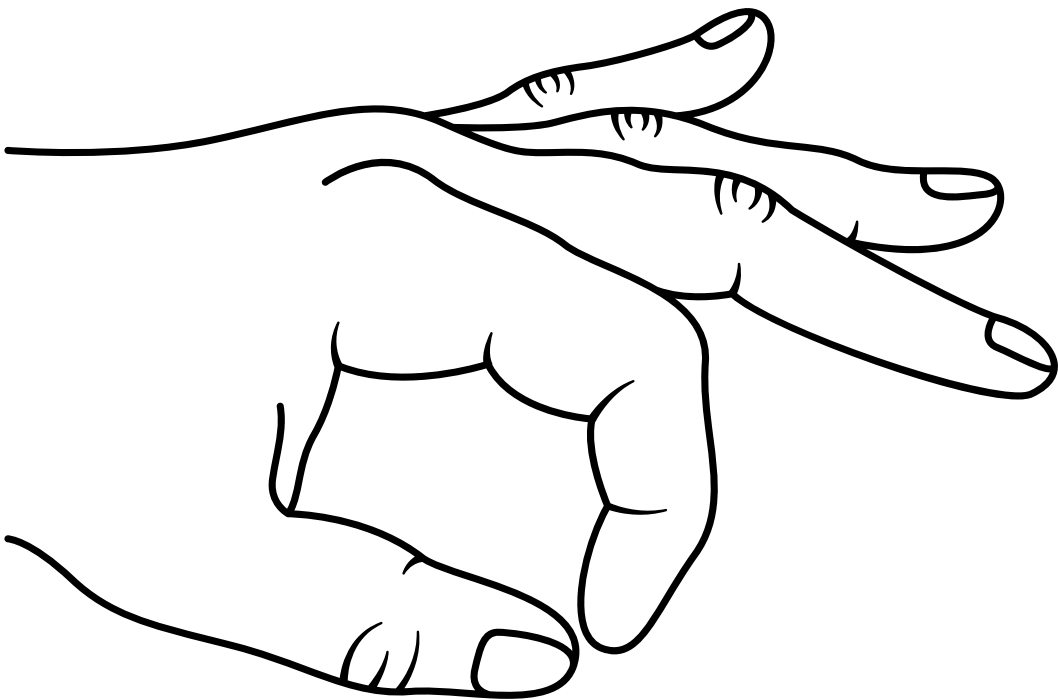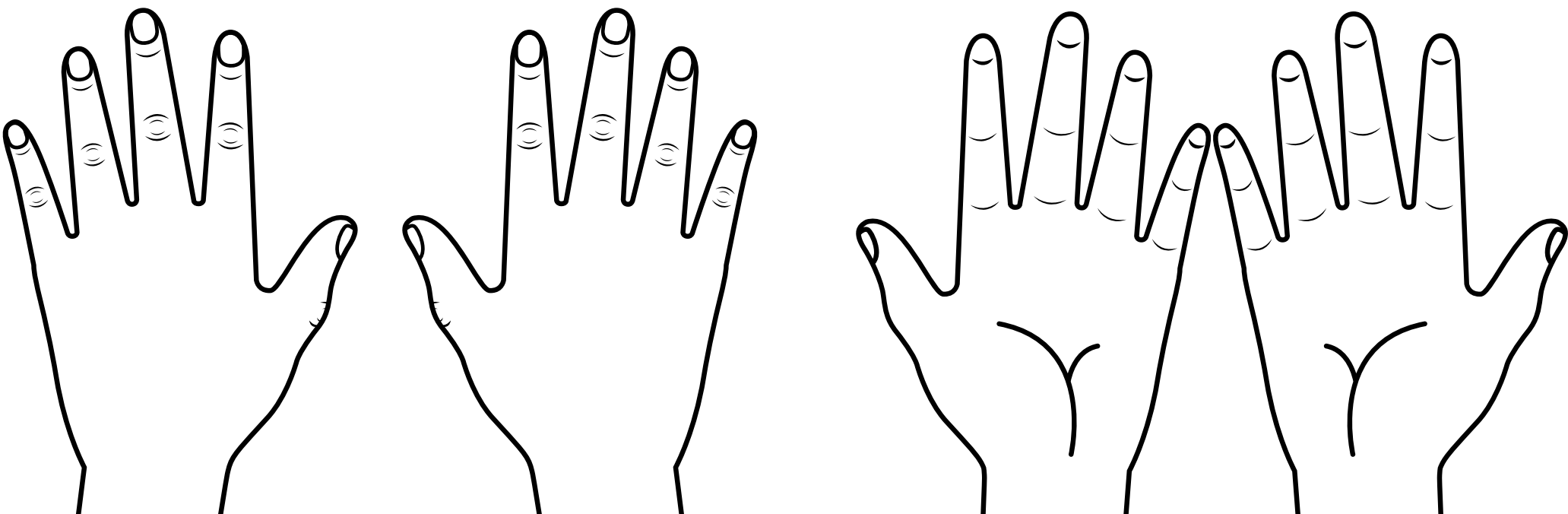


Piernas

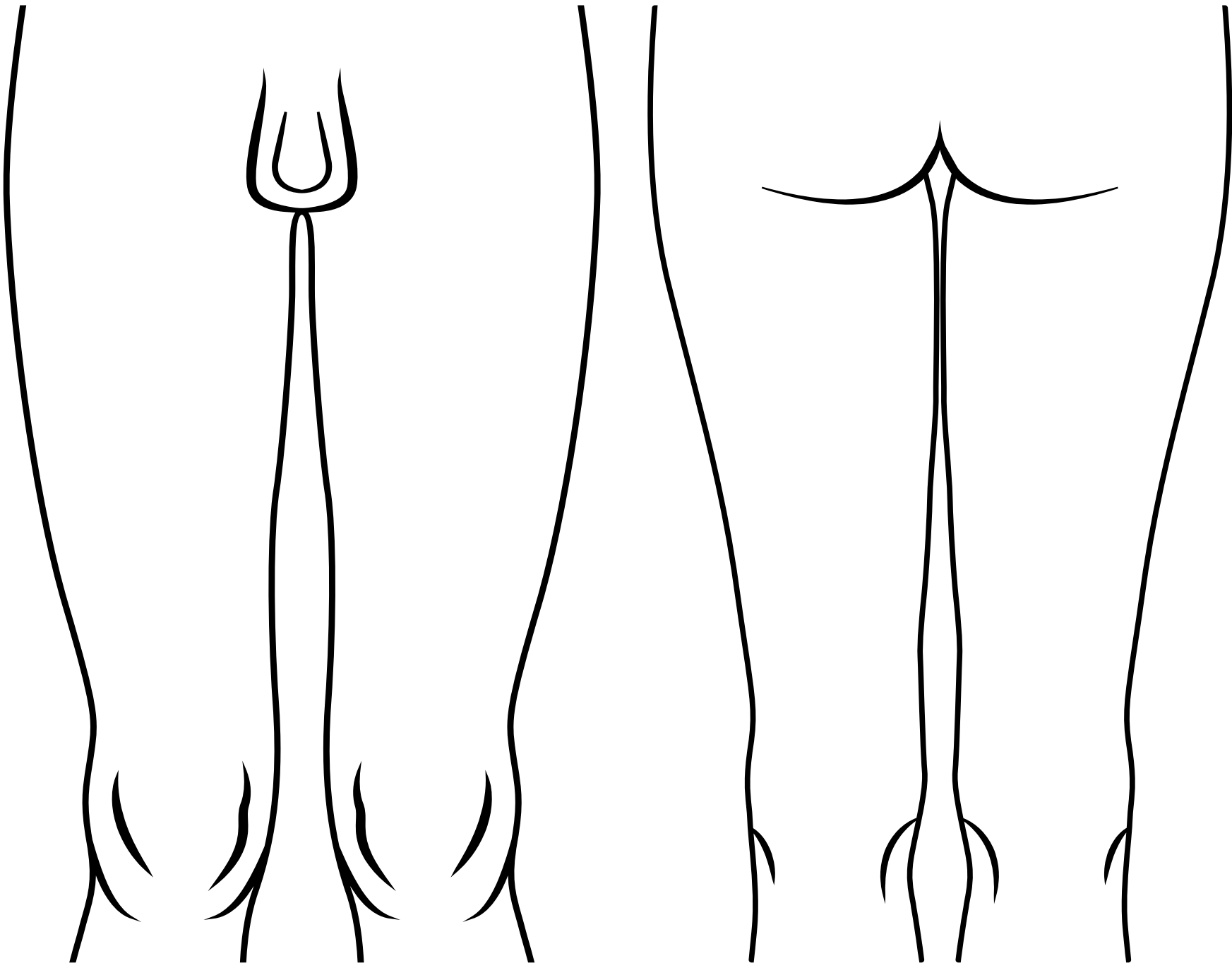


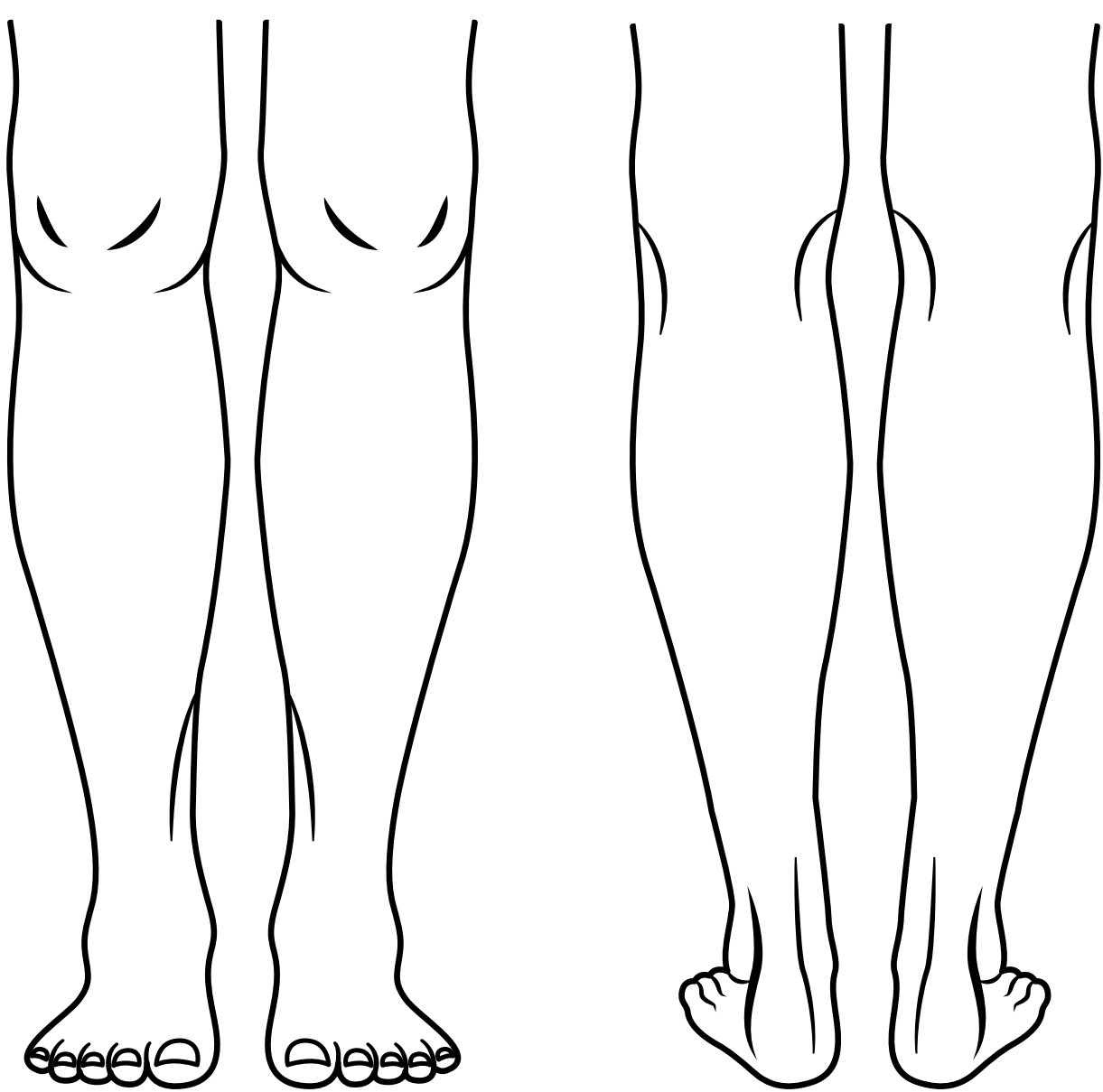


Pies

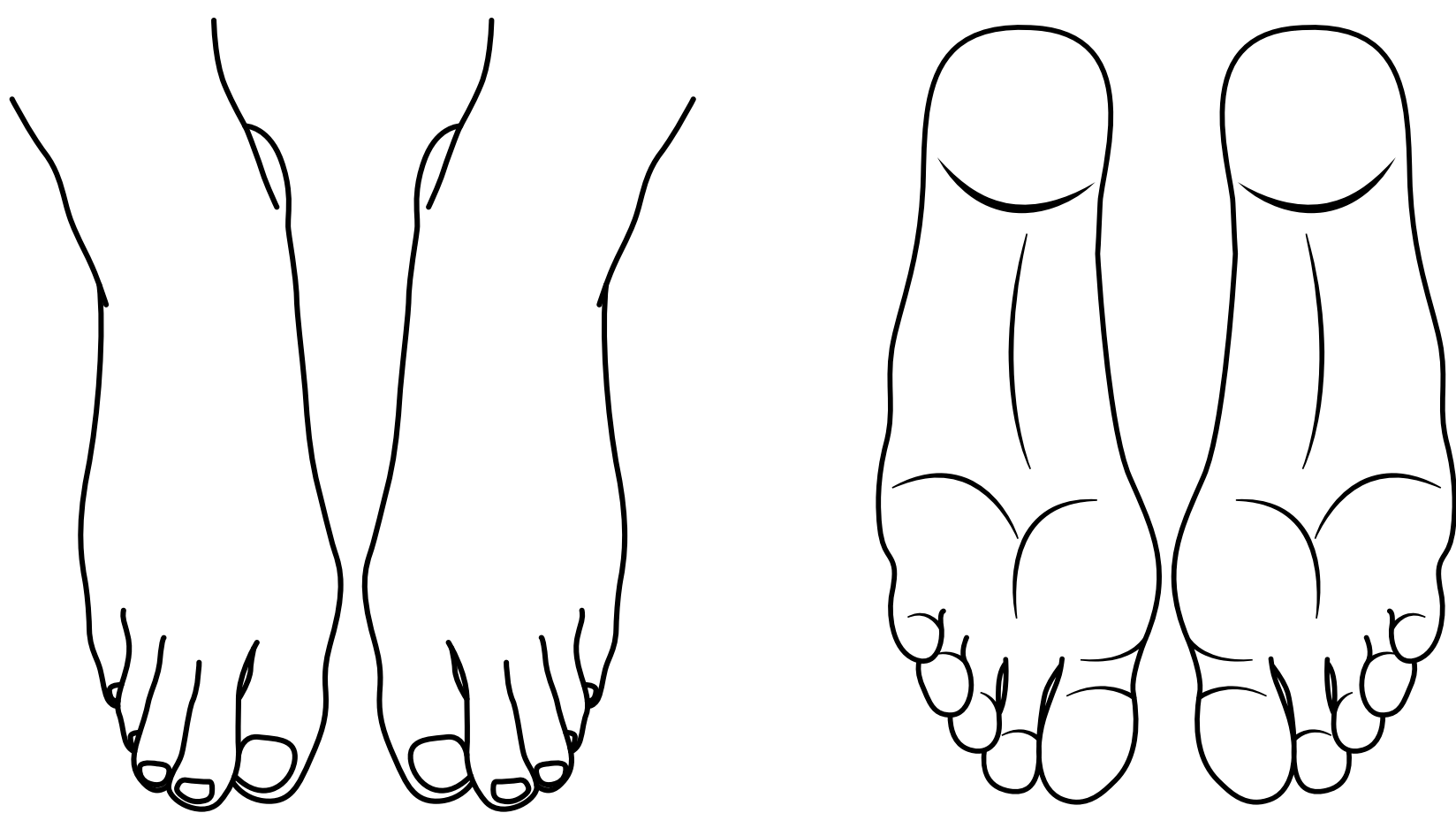


Zona genital

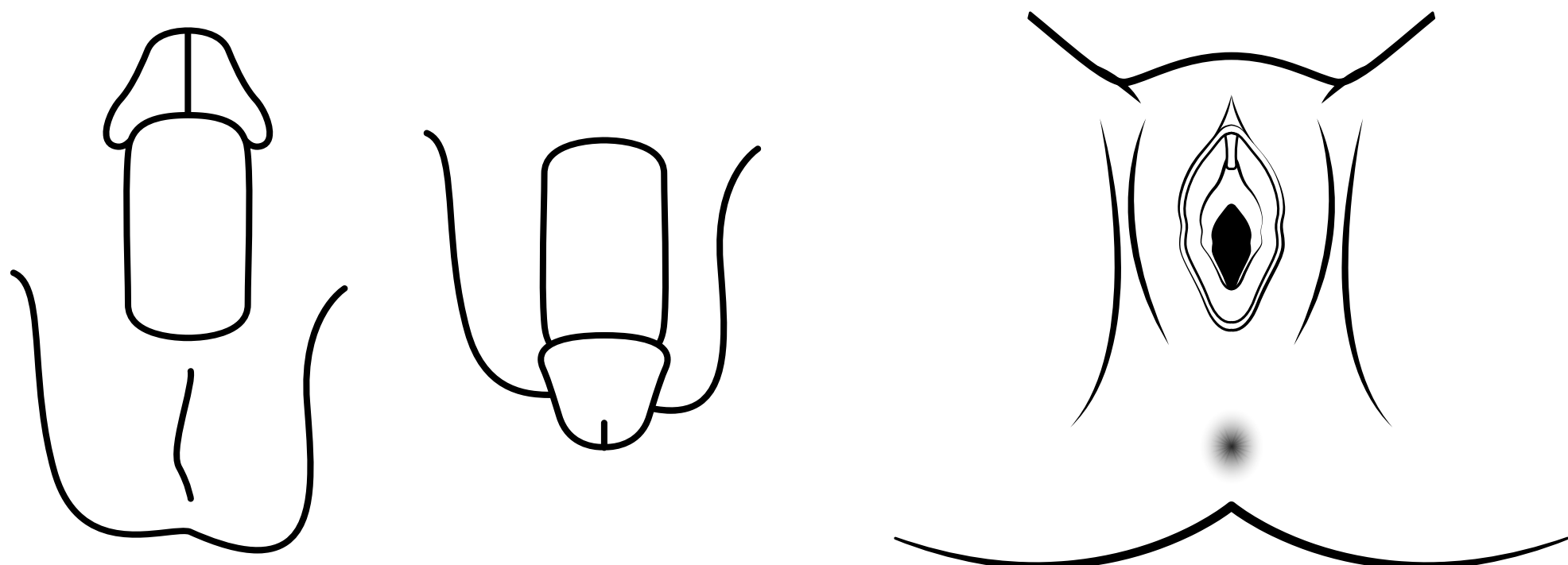


2. Ubicar el celular a más de 10 cms de la lesión.
Para obtener imágenes con un mayor acercamiento, utilice el zoom a 2x respectivamente.

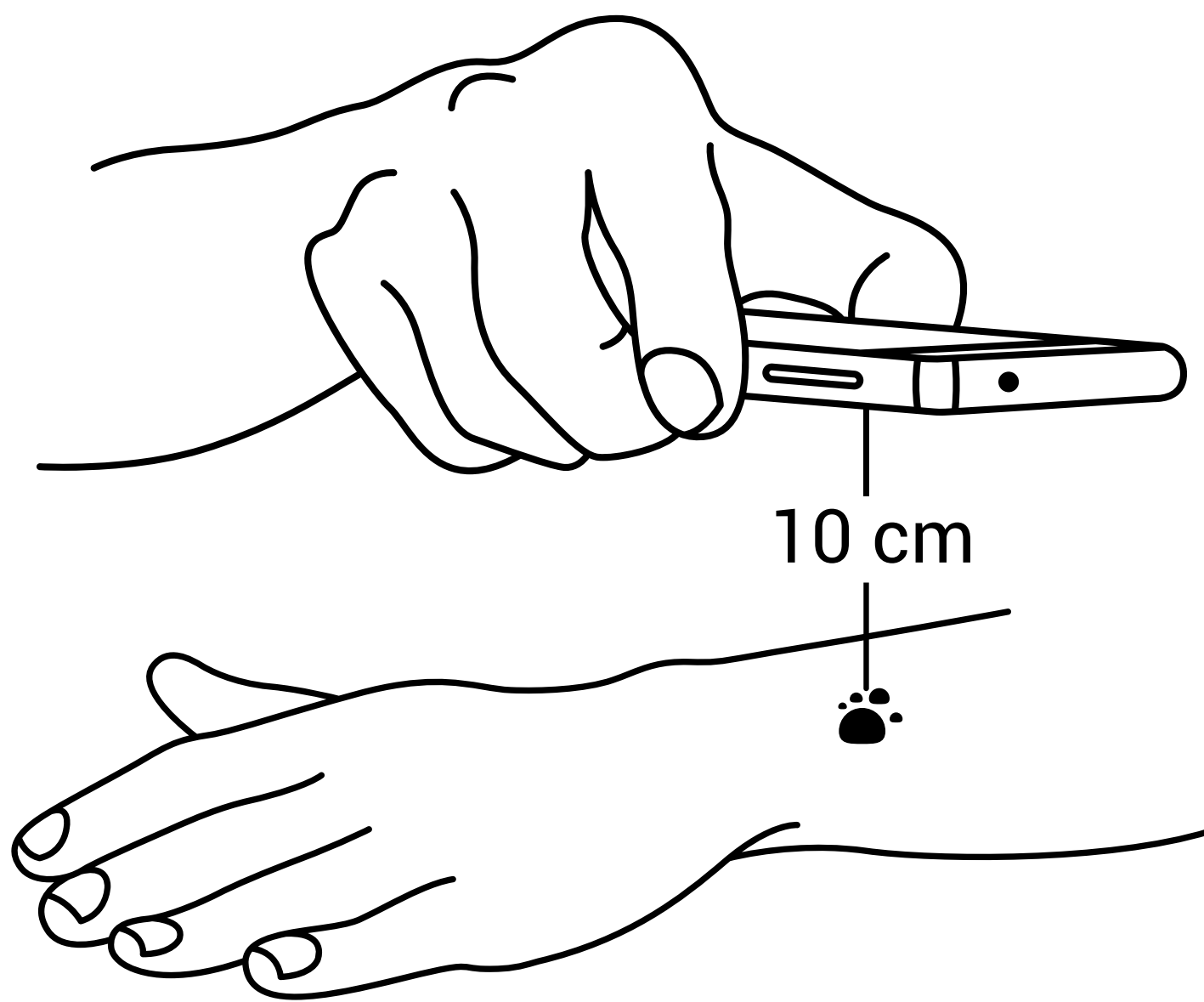


3. Recomendamos tomar mínimo 3 y máximo 5 imágenes para la teleconsulta. De las 3 imágenes tomar: 1 imagen de la región donde se ubica la lesión y 2 imágenes de detalle de la lesión.

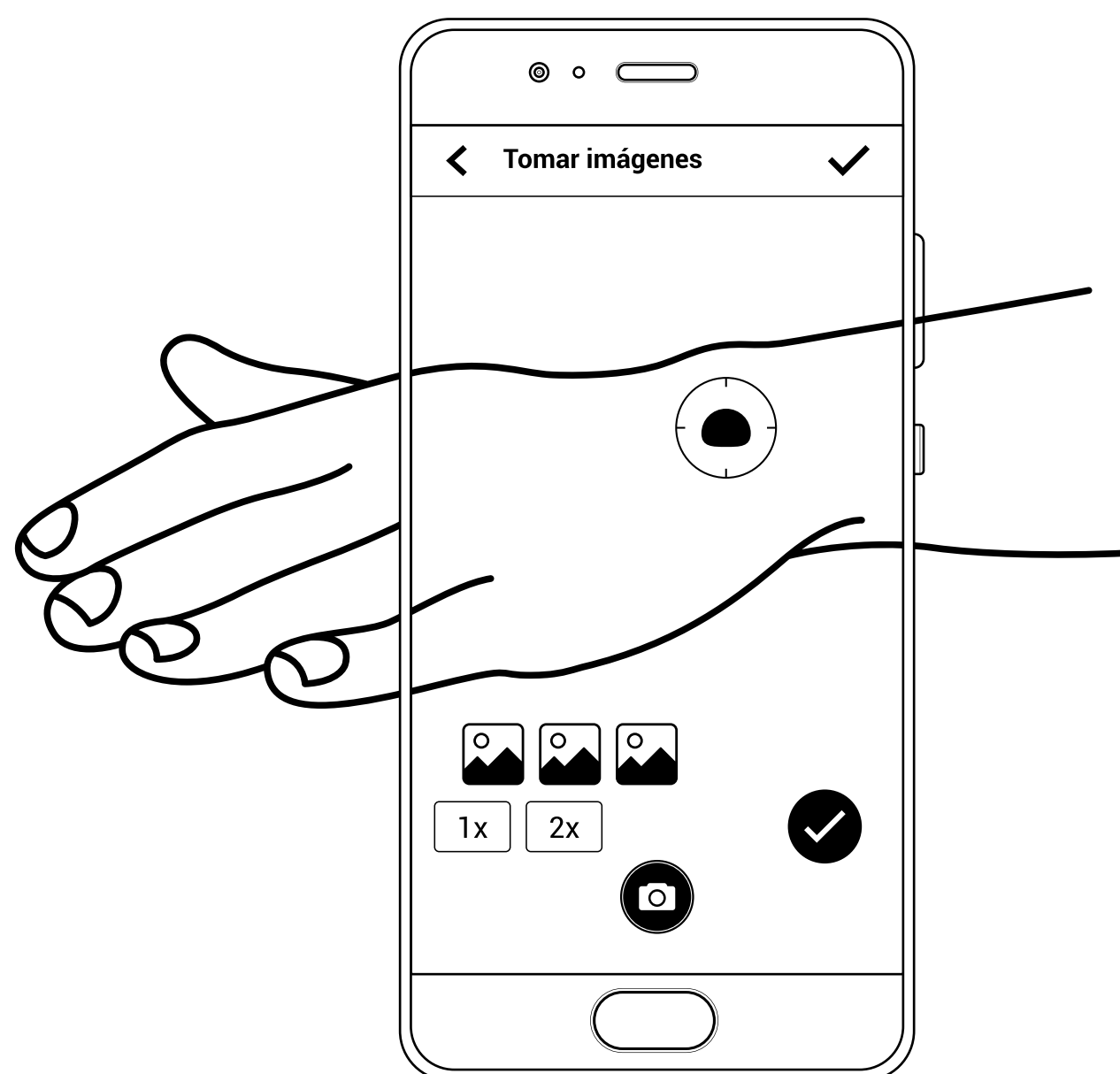


4. En caso de existir más de 2 lesiones en regiones diferentes del cuerpo y si considera que deben ser evaluadas por el dermatólogo, favor seleccione la opción de "Añadir lesión".

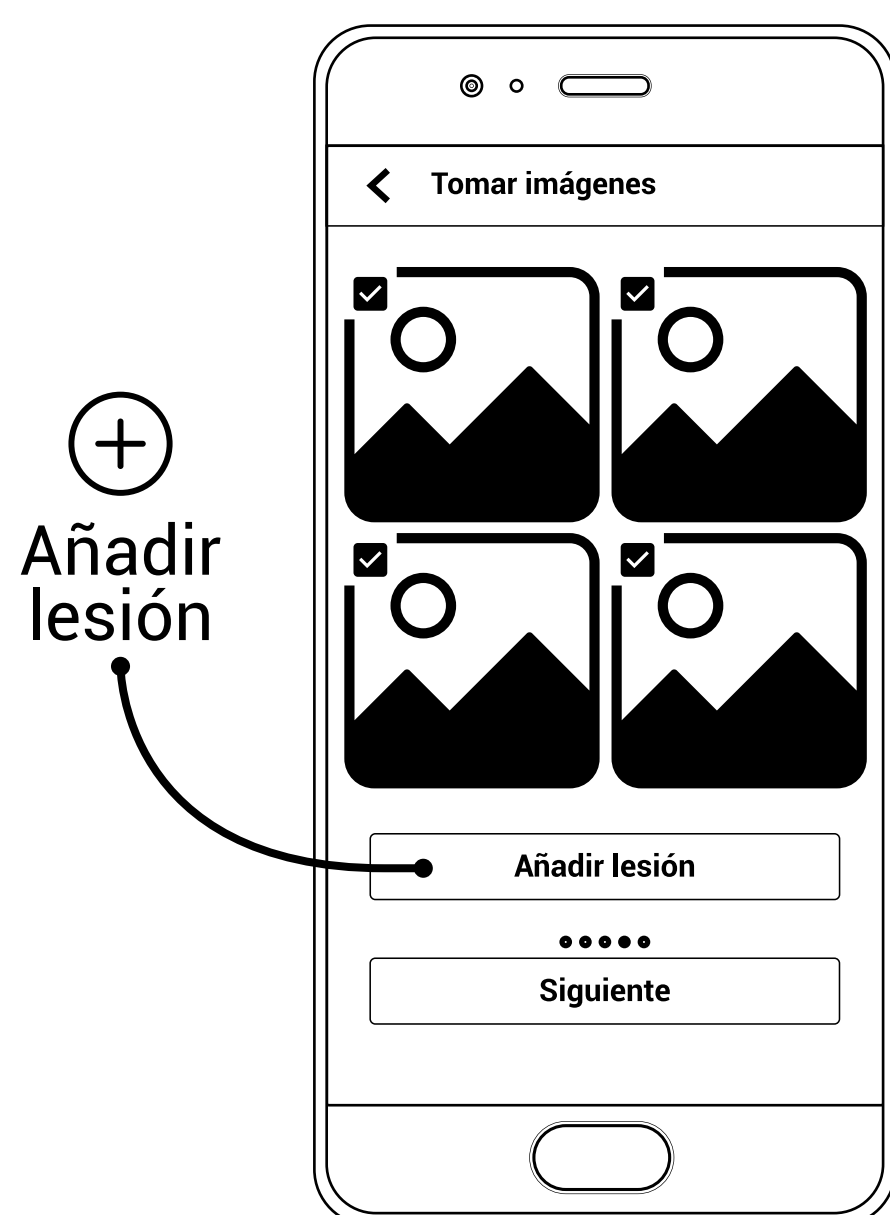


5. Tomar imágenes con zoom de 2x para obtener imágenes detalladas de la lesión.

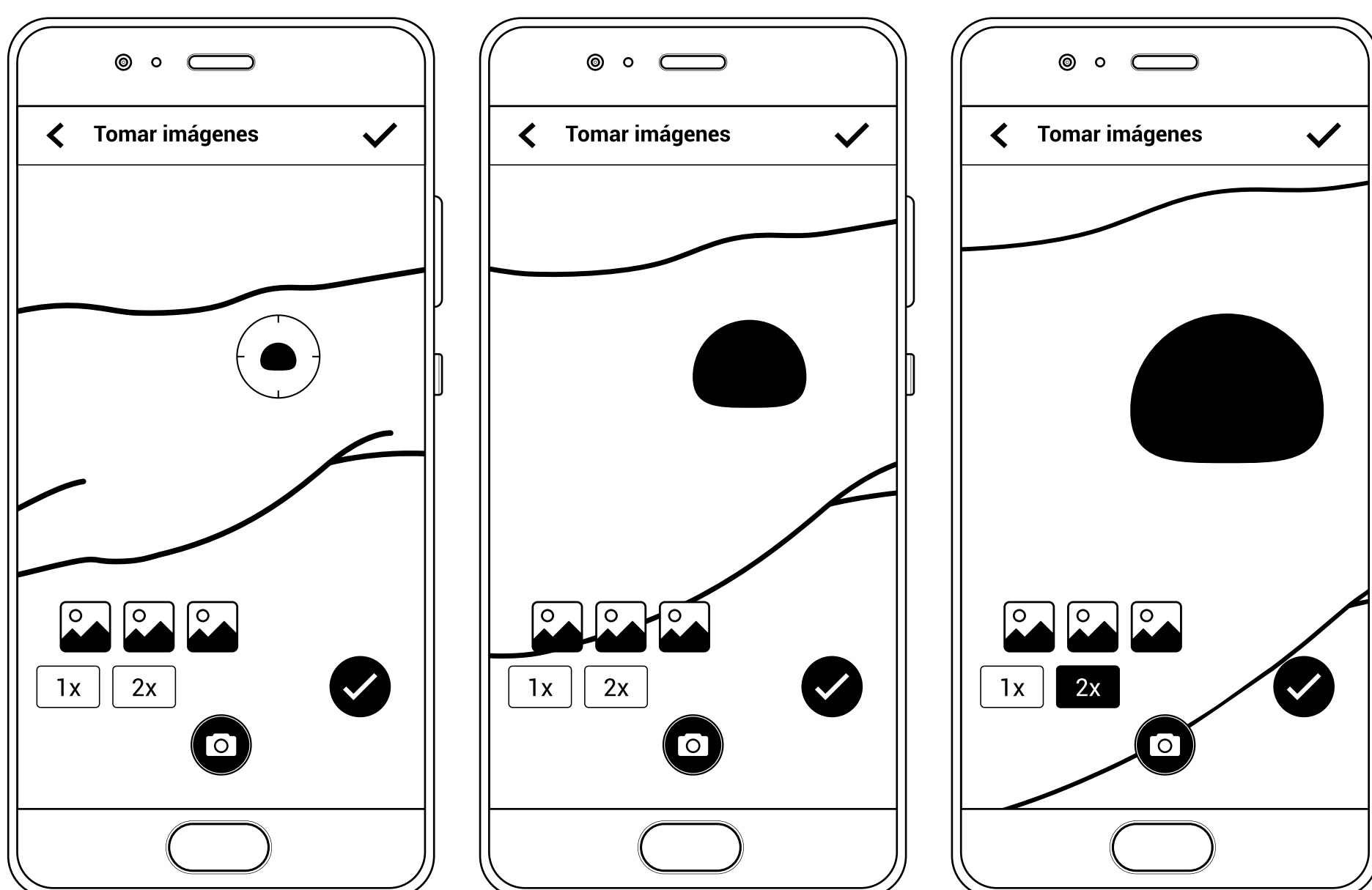

6. Para mejorar su capacidad de enfoque y calidad de la imagen, utilice el soporte de celular incluido en el Kit Telederma. Idealmente fije el soporte a una superficie plana.

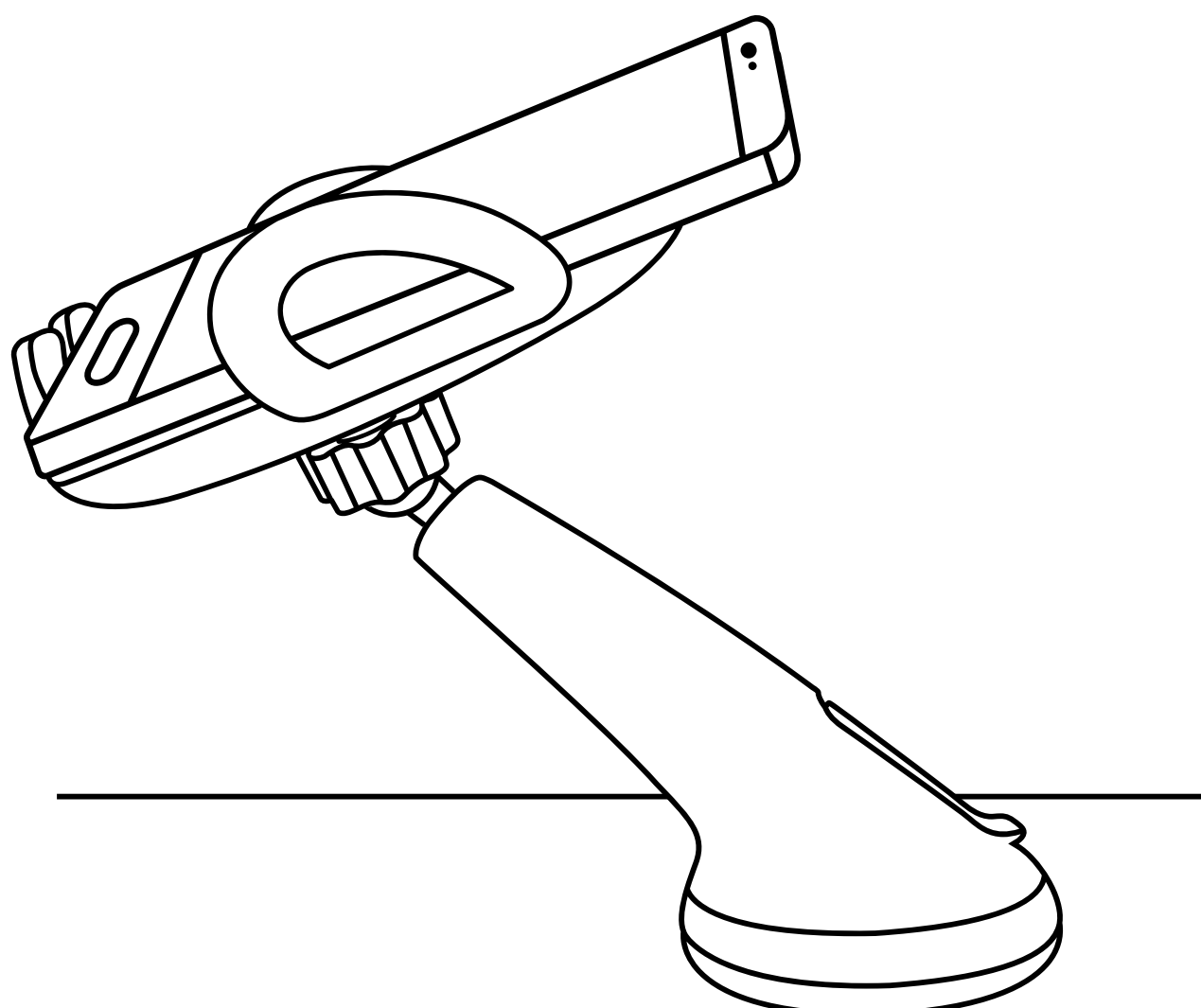

7. En lesiones elevadas (ejemplo: Leishmaniasis) tomar una imagen perpendicular que permita evaluar los bordes de la misma.

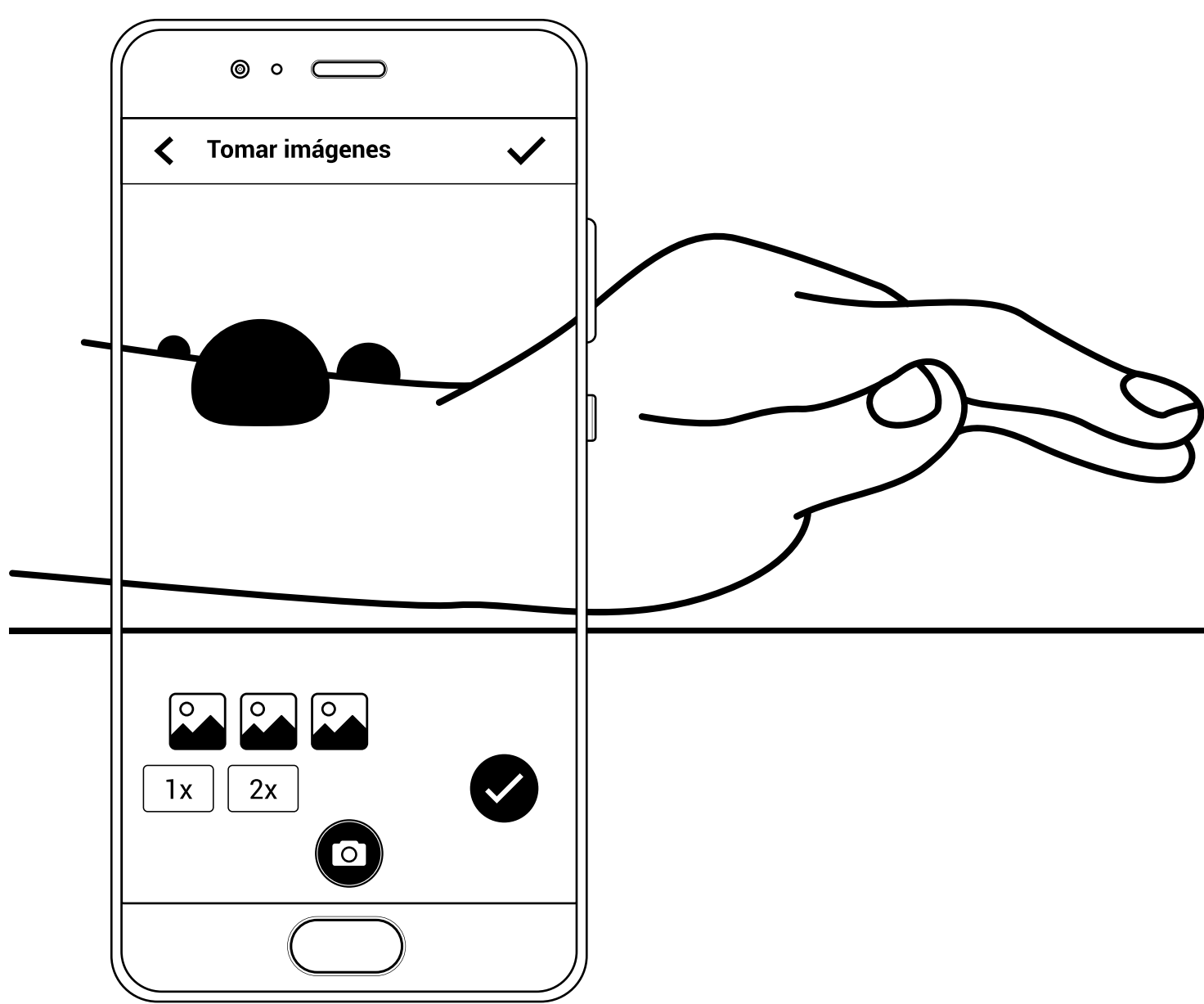

8. Luego de tomar las imágenes, realice una previsualización de la calidad y enfoque de la imagen. Seleccione las que consideren adecuadas. En caso de ser necesario re-inicié el proceso y tome nuevamente las imágenes.

